

⚠ 安全に関するご注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。</li> <li>乳幼児や12歳以下の子様、末梢神経に知覚障害のある方、妊娠中の方は、ご使用しないでください。</li> </ul>
その他のご注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>ご使用中に気分が悪くなったり、異常を感じたりした場合は、すぐに使用を中止してください。</li> <li>お身体の不自由な方は、介助なしでは使用しないでください。</li> <li>医師の治療を受けている方は、使用前に医師と相談してください。</li> </ul>
長年ご使用の機器の点検について	<ul style="list-style-type: none"> <li>次の症状がある場合は、代理店にご相談ください。           <ul style="list-style-type: none"> <li>コードを動かすと通電しない</li> <li>コードやプラグが異常に熱くなる</li> <li>こげくさい臭いがする</li> <li>その他、異常や故障がある</li> </ul> </li> </ul>

#### 製品仕様

製品名	ダイヤドーム スリムビーナス
型式	YD-101
定格	AC100V 800W 最大 800W 最少 80W
特定電気用品の表示	電気サウナバス
適合検査	JET
出力調整器	位相性制御による無段階電圧調整
タイマー	初期設定 温度 60°C タイマー 60分
ヒューズ	100V 10A 管入りヒューズ
遠赤外線照射ヒーター	大アーチ 200W×2 小アーチ 175W×2 50W×1
安全装置	各ヒーターに 100°C 過昇防止温度ヒューズ サーモプロテクター
電源コード	電力コード 2.8m 10A キャプタイヤコード 出力コード 2.3m 7A キャプタイヤコード
サイズ	幅 72×高さ 46×長さ 91 (cm) : 大アーチ 幅 62×高さ 41×長さ 91 (cm) : 小アーチ
収納時	幅 72×奥行 46×長さ 91 (cm)
重量	大アーチ 9Kg 小アーチ 10Kg コントローラーボックス 2Kg
総重量	27 kg 梱包ダンボール付属品共
ダンボールサイズ	幅 75×高さ 95×奥行 51 (cm)
付属品	スポンジレザー長枕、ネックカバー、反射敷マット
反射敷マット	幅 78×長さ 190×厚さ 2 (cm)
本体構造	木材・合板・ウレタン発泡断熱材・塩ビレザー

※製品改良の為、仕様を予告なく変更する場合があります。

#### 製品価格

総発売元	
ダイヤ技研株式会社 HEALTHY MEDICAL DEVICE	

PREMIUM ARCH  
プレミアムアーチ誕生！

Birth of Venus



ダイヤドーム

スリム ビーナス  
Slim Venus



# ダイヤドーム



## ビーナス効果

### 温活

体温を1℃アップさせて免疫力UP!  
身体の中から健康で美しく!

### デトックス

身体の中の有害物質を排出することで、本来持っている身体の機能を取り戻します。

### 疲労回復

代謝産物を分泌し、エネルギーを再生産するので疲労回復の効果が上がります

### シェイプアップ

脂肪を燃焼させて、痩せやすい身体を作り、理想の体型に近づけます。

### アンチエイジング

血行促進により細胞が若々しくなります。

### ストレス解消

中枢神経の興奮が高まり、身体機能の調整が促されて、ストレスの解消に効果的です。

### 運動不足解消

遠赤外線効果で皮脂腺から発汗します。(運動時と同じ発汗)


### 電磁波をカット

発生する電磁波を90%以上カットする新型面状ヒーターを使用しています。

### お肌を守るメッシュガード

内側は、遠赤外線を遮らずにお肌の安全をしっかりとガードするメッシュ加工です。

### 指1本でらくらくスライド

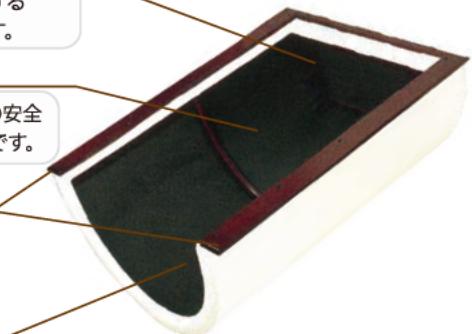

### ダイヤシートDX(デラックス)

ラジウムパウダーと遠赤パウダー配合のスーパーシートでさらにパワーアップ!

### 衛生的な抗菌加工

本体は、細菌の繁殖を抑える抗菌加工済みのレザーを使用していますので衛生的です。



### 抗菌加工



### 3つ折りタイプの敷マット

敷マットは、3つに折ってコンパクトに収納できます。

### 簡単操作で最適温度に! コントロールボックス

大・小アーチの赤外線ヒーターは、それぞれお好みの温度と時間に設定できます。



### コントロールボックス



## 特許ヒーターの優れた機能のご紹介

特許 3584231 号

### 温度が均一の特許ヒーター

アーチ左右両側の発熱量を多くして温度を高くし、アーチ天井部に向かい余々に発熱量を少なくし、更に天頂部の発熱量を最も少なくて温度を低くすると、左右下部はアーチ内の空気の対流で冷やされ、天頂部は、熱せられた空気で温度が上がり、アーチ内の面ヒーター全面が同一温度になります。従来の面ヒーターは、全面が均一に発熱するので、左右下部の温度が低く、天頂部では高くなり、10℃～15℃度の温度差ができる欠点がありました。ヒーター全面がほぼ同一温度になるので、サーモスタッフによる温度制御が良好になります。

#### 特許取得・新型面ヒーター

ヒーターに裏表がある



外に熱が逃げない

アーチ内の熱が均一

#### 従来型面ヒーター（カーボンヒーター）

ヒーターに表・裏が無い



熱が外に逃げる

熱に上下で温度差が生じる

### 短時間で実用温度に

遠赤外線放射線物質（セラミック・カーボンブラック・トルマリン・天然鉱石等）を焼き付けした熱伝導率の良いアルミ合金にヒーターを特殊形状で組み合わせた専用の特許ヒーターなので、素早く温度が上昇し、短時間で実用温度になり、遠赤外線を放射します。

### アーチの外側が熱くならない

ヒーターに表・裏がありますので、アーチの外側への熱ロスが少なく、従来型のように外装レザーが熱くなることはありません。アーチ内を効率よくあたためる省エネタイプのヒーターです。

### 耐久性アップ

従来型カーボンヒーターは経年劣化しましたが、特許ヒーターは半永久的にヒーター出力が低下しませんので、末長くご愛用いただけます。

### 特許ヒーターはメッシュでガード


耐熱素材の（ポリエスチル繊維）メッシュでヒーターの放射面を全面に覆い、両端を折り返して裏面で固定します。メッシュはヒーターの放射面に固着されず、わずかに離れて浮いた状態でセットされるので、温度が低くガードとしての効果が大きくなります。

さらに、メッシュの細かい網目は、遠赤外線の照射をさえぎる率が少なく、照射効果を高めます。

#### 特許ヒーターのメッシュ




#### 従来ヒーターの不織布

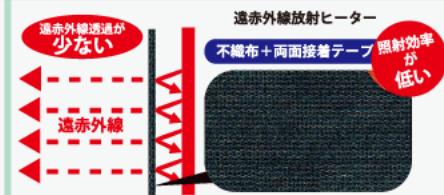

### アーチ内から放射される 《遠赤外線の秘密》

遠赤外線の中の育成光線（4～14 ミクロン）よりもさらに漫透性・安全性の高い育成光線の7～12 ミクロンの波長を実現しました。

育成光線の波長は、皮膚によく吸収されて深部まで漫透し、細胞を共振させて身体を芯から温め、血行や新陳代謝を促進して免疫力を高めるといわれています。

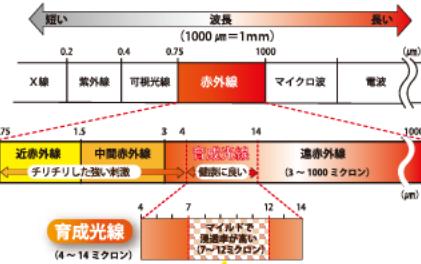

アーチから放射される  
遠赤外線はこの部分！



### 「遠赤浴」で毎日イキイキ！ 健康を守るリフレッシュ効果

お風呂や温泉、蒸気風呂（フィンランドサウナ）、砂風呂、熱気浴（100℃以上）など、あらゆる入浴方式は、身体をあたため、発汗を促し、疲れをとって、気分を爽快にするリフレッシュ効果があります。身体を芯からあたためる遠赤外線浴と、体内の老廃物や疲労物質を体外に放出する発汗浴の両方の効果が得られるのが遠赤浴です。その遠赤浴を手軽に楽しめるのが「スリムビーナス」です。健康増進、病気予防、リハビリ回復にぜひお役立て下さい。

# ダイヤシートDX(デラックス)

プレミアムの理由は…

プレミアムアーチ誕生！

PREMIUM ARCH




ダイヤシートDX

特許  
取得

特許 3894552 号


## 指一本でらくらくスライド

小アーチの左右の板がレールのようになって  
大アーチのスライドがとても軽くスムーズです！

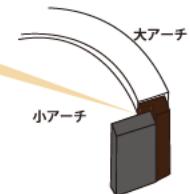

従来のドームサウナは小アーチに大アーチを乗せるだけの構造なので、  
大アーチのスライドには力が必要でした。そこで当社は、簡単で確実な  
スライド構造を開発し、特許が認められました。

簡単でスムーズなスライドとコンパクトな収納は当社の特許構造です。

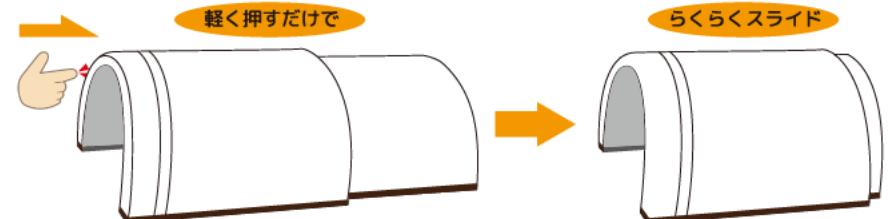

## 遠赤サウナ浴ビーナスQ & A

Q 「スリム ピーナス®」と他の遠赤浴商品  
との違いはありますか？

A 以下の4つの点に違いがあります！

- ①遠赤外線パウダー・マイナスイオンパウダー・ラジウムパウダー・配合のダイヤシートDX(デラックス)により効果がさらにパワーアップ！他社製品にはない特徴のひとつです。
- ②他製品はアーチの内側の布を接着剤で貼り付けてあるものがほとんどですが、「スリムピーナス®」は、内側がメッシュ加工になっており、遠赤外線を遮ることなく効果を得られます。
- ③他製品はアーチ内の天頂部と下部の温度差が10°C以上ですが、「スリムピーナス®」は改良を重ねた結果、温度差をなくすことになりました。（特許を取得した技術です。）
- ④大アーチのスライドが指一本でスムーズに行えます。  
また、収納もコンパクトです。（特許を取得した技法です。）

Q 機械が苦手なのですが使い方は難しいですか？

A いいえ簡単です！

- まず、付属の敷マットの上に小アーチを置き、その上に大アーチを重ねて置き、大アーチ先端に付属の構成カバーをつけるか、または、バンドにバスタオルを挟み込みます。  
次に電源コントローラーを差し込み、大・小アーチの赤外線ヒーターをそれぞれ好みの温度に設定し、入浴時間プラス5～10分（予熱時間）でタイマーを設定し、あとは、アーチ内があたたかくなったらお好みの入浴方法でお楽しみください。  
(大・小アーチのセットの際、敷マットの上にバスタオルを敷いておくと、より快適にご利用いただけます。)

Q 一般的なサウナみたいに熱くて長時間入って  
いられないのでは？

A 自分に合った温度調節ができるので、長時間の入浴も可能です。  
ただし、発汗入浴前後は、必ず各200ml以上の水分補給を行ってください。

一般的なサウナは身体の表面をあたため、頭まで熱くなるので  
息苦しく感じることもあると思います。  
遠赤外線ドームは、遠赤外線の力により低温で芯からじっくりあたためるので、熱くて辛いということはありません。  
また、頭を出して入浴できるので、息苦しくなることもありますので安心してご入浴いただけます。

Q 使用する時は服を着た方がいいですか？

A 服を着用していても大丈夫です。

発汗入浴をする際には、体の老廃物と共に大量の汗をかくので、服を着用する場合には、汚れてもよい衣服の着用をおおすすめします。

Q 子供や高齢者が入ってもいいですか？

A 大丈夫です！

ご家族皆様で、自分に合った温度設定での入浴をお楽しみください。

ただし、以下の場合の発汗入浴はおやめください。

- ・医師から入浴を禁止されている。
  - ・重度の疾患がある。
  - ・捻挫や炎症等の初期（冷却処置中）段階。
  - ・体内にボルト等の金属が留置されている方。
  - ・ベースメーカーをご使用されている方。
  - ・出血されている方。（生理中の方は気分が悪くなれば入浴可能です。）
  - ・飲酒・食事後や空腹時。
  - ・妊娠中の方
- ※疾患等のある方は、医師とご相談の上、ご使用下さい。

Q 汗が出にくい体质ですが、汗が出ますか？

A 発汗入浴中は、免疫力が向上し、基礎代謝・新陳代謝がアップしますので、入浴を繰り返すことで500ml以上の汗が出るようになります。

汗が出にくい方は、半身浴でお腹を重点的にあたため、じんわり汗がにじんできた後に肩までドームに入浴すると、長時間入浴ができるでたくさん汗をかくことができます。

