

毎日の「温活」は 遠赤外線温熱 リフレックスブーツ エアルピエ」  
身体も心もぽかぽかリラックス！

ReflexBoots  
リフレックスブーツ

エア・ルピエ



*Air Le pied*




ロングブーツタイプだから、膝上まで  
包み込み温熱をしっかりキープ！  
足元から身体全体を効率的に温めます。



遠赤外線について・・・太陽の光で体がポカポカあたたまるのは遠赤外線的作用です。

遠赤外線とは、太陽光線に含まれる、ガンマ線や可視光線、電波などの様々な『電磁波』の一種です。  
電磁波と聞くと身体に悪いイメージがありますが、電磁波には「危険な電磁波」と「身体に有効な電磁波」があります。  
遠赤外線は、「身体に有効な電磁波」となります。  
「赤外線」は可視光線より「外側」にあるため「赤外線」と呼ばれます。  
また、赤外線の中でもより可視光線に近い波長（0.75 μm～1.5 μm）を「近赤外線」、可視光線から遠い波長（3.0 μm～1000 μm）を「遠赤外線」、その中間を「中赤外線」といいます。  
[ 温熱ブーツ エアルピエ ] が放射している遠赤外線は、遠赤外線の中の育成光線（4～14 μm）よりもさらに浸透性・安全性の高い育成光線の7～12 ミクロンの波長を実現しました。

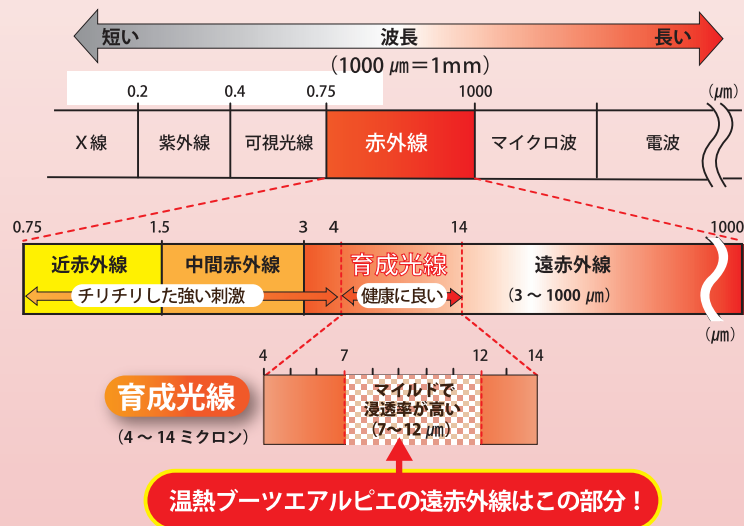

「遠赤外線」温熱の特長

遠赤外線は、物体の水分子を振動（分子活動）させて物体を温めています。  
遠赤外線の電磁波により、物体を温めるので、遠赤外線を放射するものと温める物質の間に冷えた空気が存在していても遠赤外線が物体に直接吸収されて、物体を温めることが出来ます。

遠赤外線コードヒーター配置図

遠赤外線コードヒーター

遠赤外線温熱がふくらはぎから下に配置されています。

遠赤外線の温熱が足元からじんわりと全身に伝わります。

■安全のため、使用開始10分後に「ピピピ」とアラームが鳴りお知らせします。

■ 脱着もらくらく簡単 ■



- 画像1 画像2 画像3 画像4
- ①イスの前に立ち、ブーツの上部を持ち、つま先から中に足を入れます。（画像1）
  - ②椅子に腰を下ろし、腿の位置からマジックテープを仮止めします。（画像2）
  - ③マジックテープをつま先に向かって仮止めして行きます。（画像3）
  - ④全部のマジックテープの仮止めが完了したら各部を調整して装着完了です。（画像4）

■ 仕 様

|         |                                       |                 |  |
|---------|---------------------------------------|-----------------|--|
| 商 品 名   | リフレックス ブーツ エアルピエ                      |                 |  |
| 電 源     | 電源 AC100 V～240 V 50-60 Hz (DC24V 4 A) |                 |  |
| 消 費 電 力 | 70W ± 5 W                             |                 |  |
| 定 格 時 間 | 30分                                   |                 |  |
| サ イ ズ   | ブーツ 長 さ                               | 930mm           |  |
|         | 最大周囲大腿部                               | 580mm           |  |
|         | 最大周囲ふくらはぎ                             | 450mm           |  |
|         | 足サイズ                                  | 20cm～28cm       |  |
|         | コントロールボックス                            | 213×198×88 (mm) |  |
| 重 量     | ブーツ (ホース付き)                           | 2.96kg          |  |
|         | コントロールボックス (アダプター付き)                  | 1.50kg          |  |
| ア ラ ム   | 遠赤外線モード始動後 約 10分                      |                 |  |
| 材 質     | ブーツ: 帆布地                              | エアーホース: シリコン    |  |
|         | コントロールボックス: ABS樹脂                     |                 |  |
| 製 造 国   | 中 国                                   |                 |  |

発売元 **ダイヤ技研株式会社**  
HEALTHY MEDICAL DEVICE

〒111-0042  
東京都台東区寿2-9-1 ウッドトイズビル4 F  
TEL : 03 - 5830 - 7356 FAX : 03 - 5830 - 7357

※改良のため、仕様・デザインを予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。